



# Como fazer o teste InSure One para testes de diagnóstico de câncer de intestino de rotina



Bowdoin Street  
Health Center

**NÃO FAÇA O TESTE SE VIR SANGUE VERMELHO NAS FEZES OU SE ESTIVER MENSTRUADA**




## 1) DESCARGA

Primeiro, dê descarga no vaso sanitário duas vezes, a água deve estar limpa




## 2) DESCARTE

Jogue papel higiênico usado no lixo

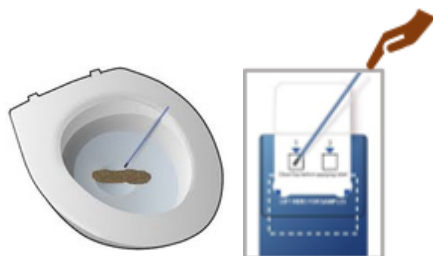

## 3) ESCOVAGEM E PINTURA

- Pincele suavemente a água ao redor das fezes por 5 segundos.
- **Agite o pincel para remover o excesso de fezes!**
- "Pinte" na caixa 1.

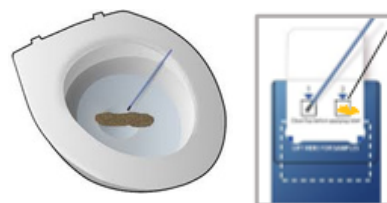

## 4) PINCELAR E PINTAR #2

- Repita com o segundo pincel.
- "Pinte" na caixa 2



## 5) ROTULAGEM

Cole a etiqueta para fixar a guia e escreva a data do teste na etiqueta.



## 6) ENVIAR POR CORREIO

Coloque no envelope e envie por correio ou entregue no prazo de 3 dias.

Em caso de dúvidas, ligue para 617-754-0004